

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА АВТОТЕСТ

Продукт: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Производител: Roche

Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie


BERLIN



Bulgarisch

Подготовка

За провеждане на теста трябва да са налични следните компоненти:

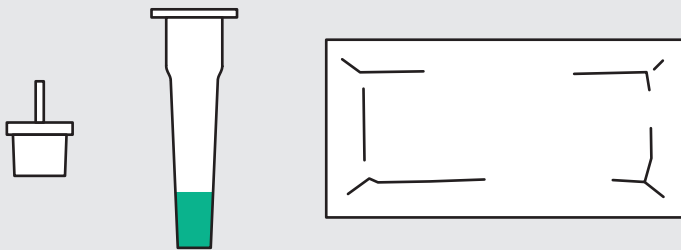

За вземане на проба използвайте предлаганите се отделно клечки-тампони (марка: Nasal Swabs, мат. № 09 421 777 001)



Вземане на проба (при стайна температура)


Вкарайте клечката-тампон в двете ноздри ок. 2 см, завъртете по я четири пъти и при това я прекарайте върху носната лигавица (ок. 15 секунди)



Behandlung der Probe

Вкарайте клечката-тампон и завъртете повече от десет пъти

При това притиснете тръбичката към тампона, за да освободите антигена

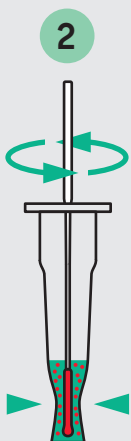


повече от 10 x

Извадете тампона със силен натиск върху стената на тръбичката и поставете капачката



Капнете четири капки във вдлъбнатината за проба в тестовата касета

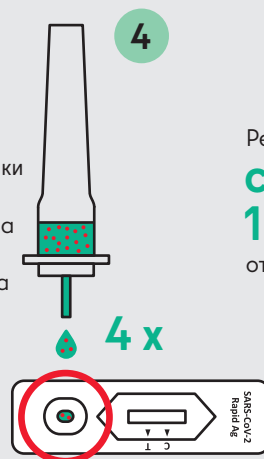

Резултат след 15 min отчитане



След повече от 30 минути не отчитайте резултат!


Оценка на резултатите

Всеки цветен оттенък при тестовата линия (T) се разглежда като положителен




Отрицателен

Цветна контролна линия (C)

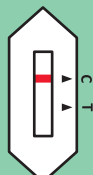


Положителен

Цветна контролна (C) и тестова линия (T)

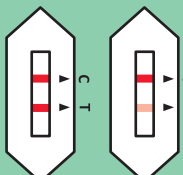

Невалиден/неясен

Няма контролна линия (C)

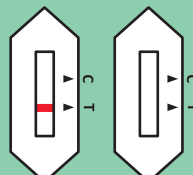

Учениците/ученичките, както и персонала в училището или градината могат да отидат в училището/градината

- Родителите съобщават в училището, че детето е болно, респ. персоналят на училището или градината съобщава, че е болен
- Учениците/ученичките, както и персоналят на училището или градината отиват за допълнителен PCR тест в централен тестов център

Повторете теста с нов материал

Изхвърляне



Изхвърляйте използваните тестови комплекти изолирано в домашните отпадъци

ПРОСТО ТЕСТВАЙ

За теб, за всички нас и срещу Корона



Автотестовите помагат посещенията в училище и градината да бъде по-безопасно по време на пандемията. За по-добра защита на отделния човек, за семействата, приятелите и колегите.

Какво представляват автотестовите за Корона?

Така наречените антигенни автотестове могат да се използват лесно и бързо (виж краткото ръководство). Тампонът трябва да се вкара на дълбочина ок. 2 cm във всяка ноздра. След 15 минути вече се показва резултатът.

Задължителни ли са автотестовите

Когато по възможност повече хора редовно правят автотестове, инфекциите с Корона вируса се разпознават навреме. Така се намаляват нови заразявания. Автотестовите са доброволни и безплатни.

Колко често трябва да се извършва автотест?

Автотест трябва да се извършва два пъти на седмица у дома – преди посещение на училище или началото на смяната.

Какво трябва да се направи при “позитивен” резултат от теста?

Ако резултатът е “позитивен”, то тестваният трябва да съобщи в училище, респ. на работодателя, че е болен и незабавно да направи последващ PCR тест в тестов център. Последващият PCR тест е безплатен за учащите се и за персонала в училището и градината. Не е необходимо записване на час. До съобщаването на резултата от PCR теста тестваният трябва да бъде в домашна карантина.

Защо и при отрицателен резултат от теста правилата за Корона трябва да се спазват?

Бързите тестове са само един елемент. Заедно с другите валидни хигиенни мерки се увеличава безопасността в училище, градината и в дома.

Към тях спадат:

- Към тях спадат:
- Носене на покритие върху устата и носа
- Миене на ръцете
- Кихане и кашляне в сгънатия лакът
- редовно проветряване

Как се съхраняват и изхвърлят автотестовите?

Тестовите трябва да се съхраняват при 2–30 °C и в никой случай да не замръзват. Отпадъците от използваните тестове могат да се изхвърлят в здрава и плътна торбичка за боклук заедно с другите домашни отпадъци. Преди прилагане тестовите трябва да се затоплят до стайна температура (15–30 °C).

При типични за Корона симптоми: Трябва ли все пак да се прави автотест?

Не. При конкретно подозрение за инфекция с Корона засегнатите да се обърнат към домашния лекар или здравното учреждение.

Последващи PCR тестове

Положителният резултат от теста трябва да се провери в централен център за последващи PCR тестове. Тези центрове за последващи PCR тестове са отворени ежедневно от 7:00 часа до 16:30 часа без запазване на час.

Актуалният списък на центровете за последващ PCR тест за училища, градини и ясли се намира тук:



www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf

Повече информация за автотеста за Корона

- Кратко ръководство и видеофилм с упътване на различни езици: арабски, турски, руски, български, полски, английски, френски, испански, сръбски, вьетнамски
- Местоположения на центровете за последващи тестове
- Други въпроси и отговори
- Ръководство за употреба от производителя



www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests

БЛАГОДАРИМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО